



Jcraft

この一本が、
すべての肌を
呼びさます。



サロン美容機器メーカーが
作った家庭用美顔器





まったく新しい、スティックタイプ美顔器。

コンパクトでスリムなのに大きく使えます。また、届きにくかった凹み部分のケアも可能です。

◎ゾーンケア

一気に広い範囲のケアが可能です

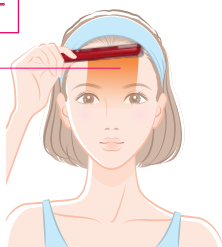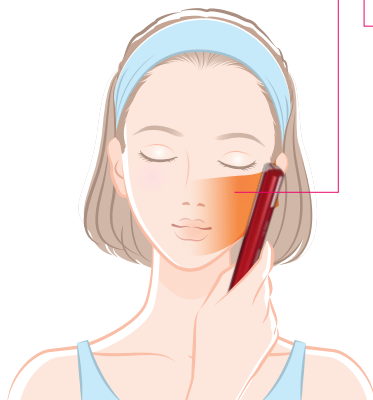

おでこ等広い部分を大きくケアできます。頬は口角から目じり、耳元の方に電極をあててトリートメントします。

◎ピンポイントケア

狙ったところを繊細にケアできます




ほうれい線や目じり、眉間等の届きにくかった凹部の細かいところにも先端の電極が届くので優しくトリートメントします。

[低周波&電気パルス]ふたつのトリートメントモード


① ポレーションモード

電気パルスで化粧水や美容液の浸透を促進します。
ポレーションモードの場合はボリューム表示部が青色点灯します。

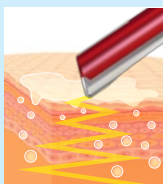

② セルモード

引き締めリフトアップを目的とした低周波。
セルモードの場合はボリューム表示部が赤色点灯します。

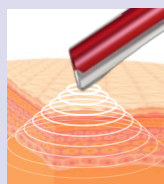

いつでも手軽に使用でき、防滴仕様だから洗面所・浴室でも使用可能です。
(濡れている手でも使用できますが水をかけたり水につけたりすることはできません)
小型でスティック型だから楽に持ち運びでき、どこにおいても邪魔になりません。
使用準備がいらないため、使いたいと思ったらすぐに使え、日常的に継続して使用すれば効果的です。



●使用方法

- ・スタートストップボタンを長押しして電源を入れます。
- ・スタートストップボタンを押して、モードを選びます。
(赤色点灯はセルモード、青色点灯はポレーションモード)
- ・トリートメント部位に、ジェルを塗布しトリートメントをします。ポレーションモードの場合はお好みの化粧水を塗布して下さい。
- ・トリートメントを開始しボリュームアップ、ボリュームダウンボタンで痛くなく心地よいボリュームに調整します。
- ・停止は、スタートストップボタンを長押しして電源を切ります。



- USB 充電式
 - 防滴使用
 - サイズ：中心部長さ175mm
直径×24mm
 - カラー：ワインレッド
- オープン価格 日本製



Jcraft

株式会社 ジェイクラフト <http://jcraft.co.jp/> TEL: 0725-53-0610 FAX: 0725-53-0620
〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 3-1-11 和泉市産業振興プラザ南館 RO205